


Ramcurette

Curetta per prelievo endometriale aspirato
(metodo Vabra)

*Curette for aspirated endometrial sampling
(Vabra method)*

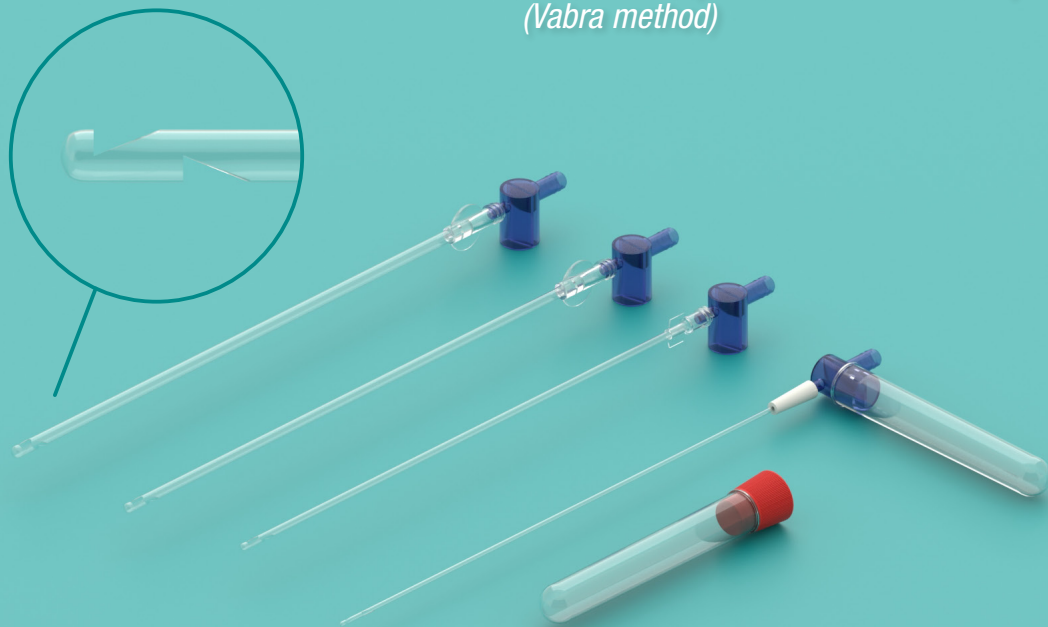

Per un prelievo endometriale cito-istologico aspirato e raschiamento terapeutico senza anestesia.

Il kit è costituito da:

- una curetta con raccordo luer da collegare al deviatore di flusso con filtro;
- una provetta da collegare al deviatore per la raccolta del campione.

Il kit si può connettere a un aspiratore attraverso un tubo. Il profilo della punta rende la procedura accurata ed efficace.

Per una raccolta più abbondante, si consiglia un risciacquo della punta all'interno della provetta al termine del prelievo.



For aspirated cyto-histologic endometrial sampling and therapeutic curettage without anesthesia.

The kit includes:

- a curette with luer connector to be joined to a flow deflector provided with filter;
- a test tube to be connected to the deflector for sample collection.

The kit can be connected to an aspirator through a tube. The tip design allows for an accurate and effective procedure.

The collected sample will be more abundant by rinsing the curette tip inside the test tube at the end of the procedure.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720109	Lunghezza 22,5 cm - Ø esterno 2 mm Length 22,5 cm - O.D 2 mm	50 pz./pcs.
720110	Lunghezza 22,5 cm - Ø esterno 3 mm Length 22,5 cm - O.D 3 mm	
720111	Lunghezza 22,5 cm - Ø esterno 4 mm Length 22,5 cm - O.D 4 mm	
720211	Lunghezza 22,5 cm - Ø esterno 5 mm Length 22,5 cm - O.D 5 mm	

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

