




# Endoflower

Dispositivo per prelievo endometriale  
*Endometrial sampling device*

Prelievo endometriale  
Endometrial sampling

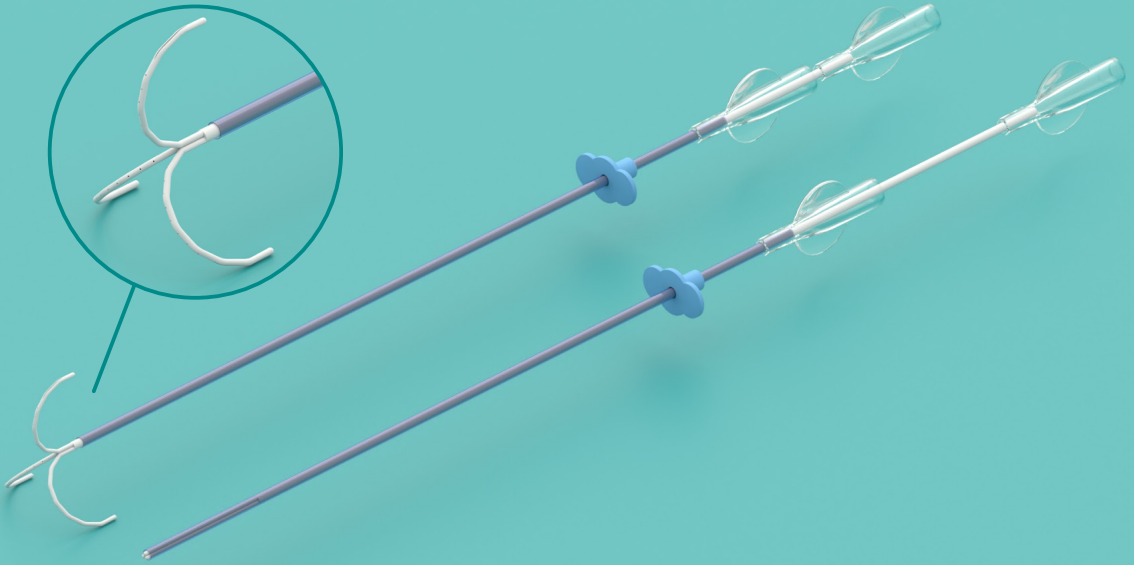

 Per il prelievo di cellule endometriali per esame citologico con sistema ThinPrep Pap Test. La punta presenta 3 sottili estremità flessibili ricurve con micro-fori che permettono un'abbondante raccolta di cellule endometriali. Il fermo sulla guaina esterna determina la corretta profondità di inserimento. Screening facile e indolore, evita la dilatazione o la trazione del collo dell'utero.

 Used to sample endometrial cells for liquid-based thin-layer cytology test (TCT). The tip, shaped with three curved thin arms provided with micro holes, allows a rich endometrial cells sampling. A positioner placed on the outer sheath determines the correct insertion depth. For a painless and easy screening avoiding dilation and traction of the uterus neck.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720241	Lunghezza 25 cm - Ø esterno 3 mm Length 25 cm - O.D 3 mm	25 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

